

BIOCHIMIE ANALYTIQUE

I. ECHANTILLON

1. PRELEVEMENT

Le matériel utilisé en biochimie peut être constitué soit par des prélèvements de liquide biologique (sang, urine, liquide de ponction...) soit par des prélèvements tissulaires (biopsie du foie, muscles et peau). Il est indispensable de connaître l'origine de l'échantillon qui doit être authentique et représentatif c'est-à-dire qu'il doit donner une image valable de l'ensemble du tissu et du liquide que l'on étudie.

a- Sites de prélèvement du sang

Le recueil des échantillons de sang se fait par ponction veineuse. Le lieu de prélèvement varie selon les espèces animales :

- **Chez les grands mammifères notamment le chameau, le cheval, le bœuf, le mouton, la chèvre** : veine jugulaire ou tout autre veine apparente comme les veines mammaires et caudales.
- **Chez le lapin** : veine marginale de l'oreille.
- **Chez le chien** : veine saphène externe.
- **Chez les oiseaux** : veine alaire (brachiale).
- **Chez les petits animaux de laboratoire** : veine auriculaire ou veine rétro-orbitale de même qu'une ponction cardiaque.

Quelques précautions doivent être envisagées :


- La quantité maximale de sang pouvant être prélevée chez un animal varie en fonction de l'espèce, de la race ou lignée, du poids, et de l'état de santé.
- Lors du calcul du volume sanguin maximal pouvant être prélevé, une attention doit être portée aux animaux obèses ou vieux. Pour un même poids, leur volume sanguin sera plus petit que celui d'animaux en bonne santé.
- Il faut observer l'état général des animaux avant les prélèvements et noter toute anomalie. Si un animal présente des signes cliniques, un vétérinaire doit être consulté avant de procéder au prélèvement.


- Il faut prélever le minimum de sang requis pour les analyses à effectuer, il est donc important de choisir le site de prélèvement en fonction de l'échantillon requis.
- Il est préférable d'utiliser le plus grand calibre d'aiguille permis afin de faciliter le prélèvement et d'éviter l'affaissement du vaisseau sanguin.
- Le nombre de ponctions devrait se limiter à trois, après quoi l'assistance d'une personne expérimentée doit être demandée. Et il est dans ce cas obligatoire de d'administrer des fluides surtout après un prélèvement de plus de 10% du poids de l'animal.

b- Sérum ou plasma ?

Certaines analyses ne peuvent être effectuées que dans du sang total, du sérum ou du plasma, mais pour la plupart des analyses biochimiques les deux derniers spécimens peuvent être utilisés indifféremment.

Cependant, la préparation d'un plasma est plus rapide, permet de récupérer un volume supérieur à celui du sérum, et limite notablement l'hémolyse dans les espèces dont les globules rouges sont fragiles, comme le chien ou le mouton. Par ailleurs, pendant la coagulation, certains constituants « fuient » des cellules (par exemple les enzymes, le potassium, etc.) et modifient légèrement la composition du sérum.

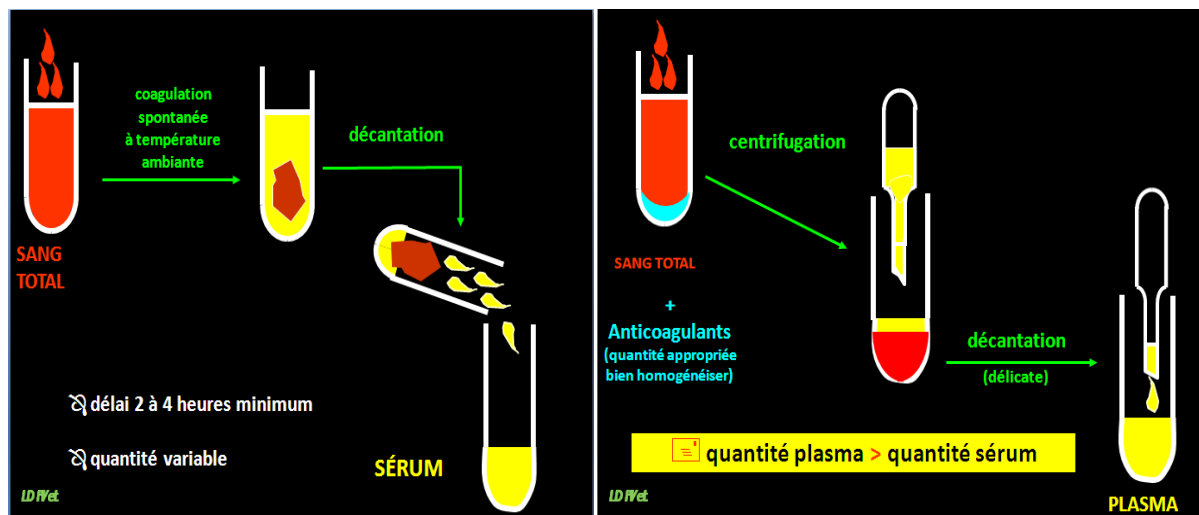

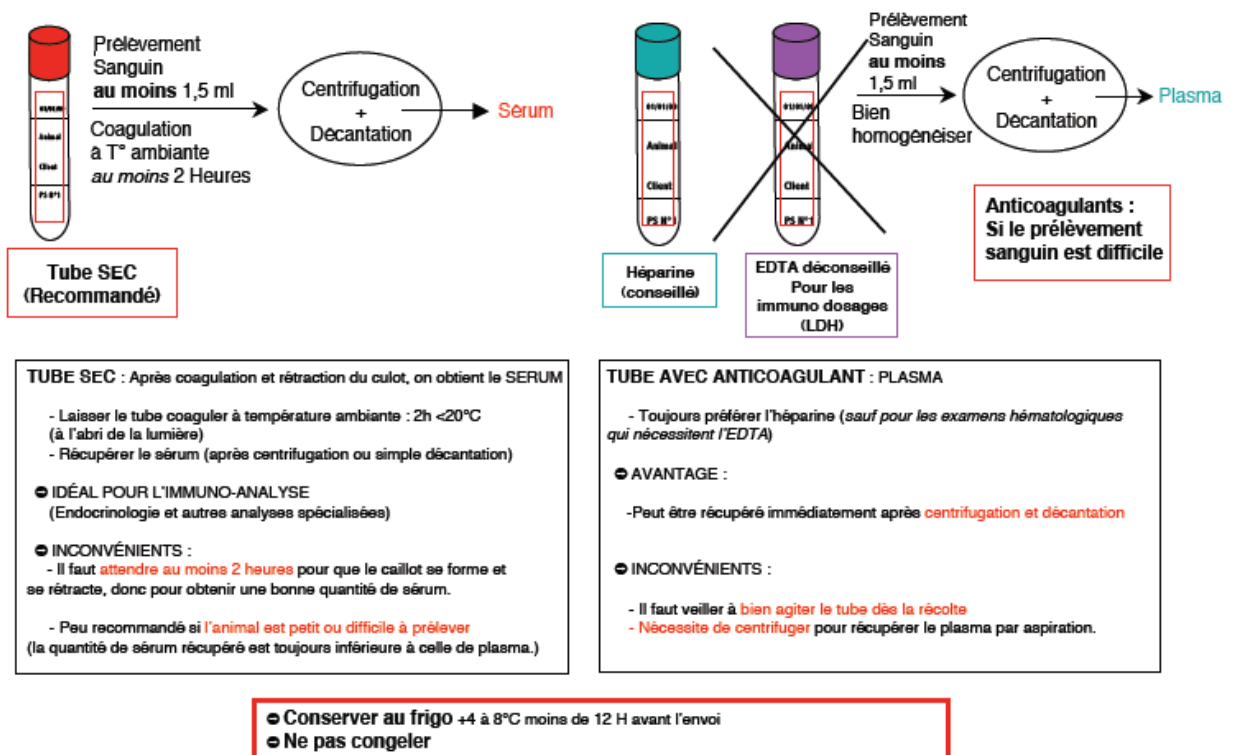

➤ **Le plasma est plus simple et plus rapide à obtenir. Il est théoriquement plus représentatif de la réalité physiologique d'un sang non coagulé. Toutefois, certains dosages préfèrent le sérum pour des raisons diverses liées à la technique utilisée ou à la présence d'anticoagulants dans le plasma qui peut générer des interférences.**

2. CHOIX DES ANTICOAGULANTS

Pour réduire les interférences, plusieurs anticoagulants peuvent être utilisés. Les tubes pour la préparation du plasma distribués par les fournisseurs contiennent déjà leurs anticoagulants. Un code de couleur international pour le bouchon a été mis en place pour la détermination aisée du type d'anticoagulant utilisé.

⇒ **Les sels d'héparines** (héparinate de lithium, héparinate d'ammonium)

Les sels d'héparine sont très utilisés pour l'obtention de plasma. Attention, il faut tenir compte du sel utilisé pour éviter les interférences. Par exemple, les sels de lithium ne peuvent pas être utilisés pour le dosage du lithium, les sels d'ammonium ne peuvent pas être utilisés, ni pour le dosage de l'ammonium, ni pour le dosage de l'urée.

⇒ **L'EDTA**

L'EDTA est l'acide éthylène diamine tetra-acétique. Il inactive le calcium nécessaire à la coagulation, ainsi que d'autres ions comme le magnésium, en formant un complexe inactif. Il ne peut donc pas être utilisé pour doser le calcium, le magnésium et certains métaux lourds (plomb).


⇒ **Le citrate de sodium**

Le citrate de sodium inhibe également le calcium. Le citrate est souvent utilisé pour obtenir du plasma en vue d'examen de la coagulation ou pour la mesure de la vitesse de sédimentation. Il ne peut pas être utilisé, par exemple, pour le dosage du sodium.

⇒ **Les inhibiteurs de la consommation du glucose (fluorure de sodium, iodoacétate)**

Entre le prélèvement et la préparation du plasma, les cellules sanguines présentes dans le tube sont vivantes et continuent la consommation du glucose et du lactate contenu dans le plasma. Elles réduisent donc leur concentration et faussent l'interprétation de leur dosage. Pour un dosage correct qui ne tient pas compte de ce phénomène, il est nécessaire d'empêcher la consommation de ces composés par les cellules.

Le fluorure de sodium ou l'iodoacétate inhibent cette consommation et peuvent être utilisés conjointement à un autre anticoagulant pour le dosage de paramètres comme le glucose et le lactate.

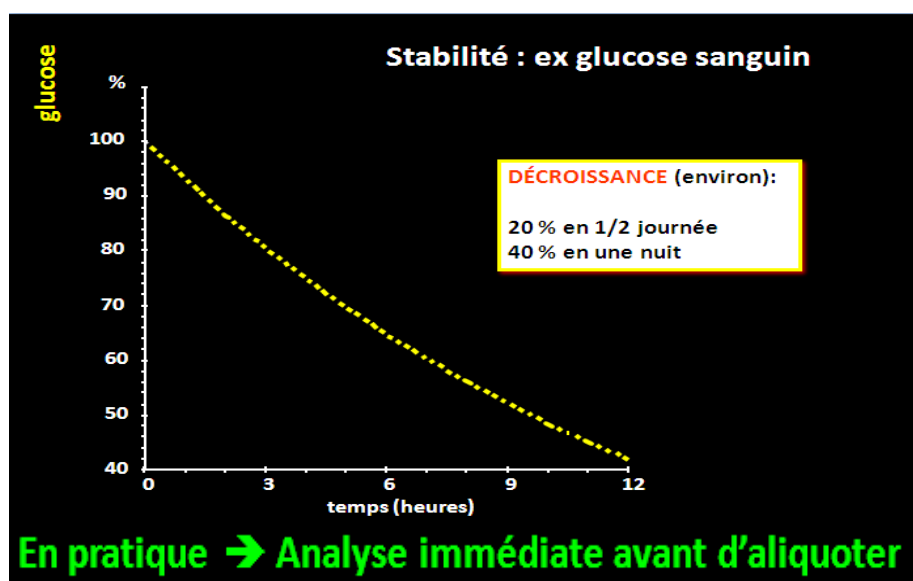

Délais de consommation du glucose

Principaux anticoagulants utilisés

HÉPARINATE DE LITHIUM	EXTRAIT D'HÉPARINE NATURELLE → BIOCHIMIE
EDTA	SEL DIPOTASSIQUE DE L'ACIDE ETHYLÈNE DIAMINE TETRAACETIQUE → hématologie
CITRATE 9 %	CITRATE TRISODIQUE → coagulation
WINTROBE	OXALATE D'AMMONIUM DE POTASSIUM → coagulation
Éventuellement + fluorure de sodium ou iodoacétate	Inhibiteurs de la glycolyse Glucose / Lactate

- L'héparine est l'anticoagulant de choix en biochimie car elle interfère peu avec le dosage de la plupart des constituants biochimiques sanguins.
- L'EDTA interfère avec le dosage de nombreuses enzymes sériques et ne doit pas être utilisé en biochimie.
- Le dosage différé du glucose sanguin doit impérativement être réalisé sur du sang conservé sur un anticoagulant inhibiteur de la glycolyse.

3- ECHANTILLONS HEMOLYSES, LIPEMIQUES, ICTERIQUES

a- L'hémolyse

L'hémolyse si elle est présente modifie le pH des réactions chimiques et interfère directement avec les dosages réalisés par spectrophotométrie. Ces interférences sont dues à la libération dans le sérum ou le plasma de constituants présents dans les globules rouges. Cette altération des échantillons peut apparaître fortuitement, l'hémolyse doit donc être surveillée visuellement, et tout échantillon dont la couleur vire au rose ou au rouge ne doit pas être utilisé pour le diagnostic. Pour de nombreuses méthodes, l'hémolyse augmente faussement l'ALAT, l'ASAT, la créatinine, le calcium, l'albumine, le potassium. Une fausse diminution des triglycérides peut également se produire. Le glucose, le magnésium, le phosphore, et le cholestérol peuvent être augmentés ou diminués selon les méthodes utilisées.


b- La lipémie

Un échantillon lipémique est un échantillon dont le sérum ou le plasma a un aspect trouble ou laiteux dû à l'augmentation des lipides. L'aspect lipémique d'un échantillon peut être significatif d'une anomalie du métabolisme des graisses. Un simple examen visuel de l'échantillon permet de détecter ces troubles.

La lipémie augmente faussement toutes les enzymes hépatiques, la bilirubine, le glucose, le calcium et le phosphore. Les protéines totales lorsqu'elles sont mesurées par réfractométrie seront faussement augmentées, mais la méthode de Biuret est peu affectée même par une grave hyperlipidémie. L'albumine est généralement diminuée en utilisant la méthode au vert de bromocrésol.

c- L'ictère

Un échantillon ictérique est un échantillon dont le plasma ou le sérum a perdu sa couleur normale jaune paille, en virant vers le jaune foncé, brun ou verdâtre. Cette situation est due à une augmentation anormale de la bilirubine, composé ayant une coloration brunâtre. De nombreuses pathologies, en particulier celle touchant le foie ou les globules rouges, sont associées à l'élévation anormale de la bilirubine dans le sang, colorant ainsi la peau et les liquides biologiques en jaune foncé ou brun. Un échantillon ictérique doit être signalé par le laboratoire d'analyses médicales.

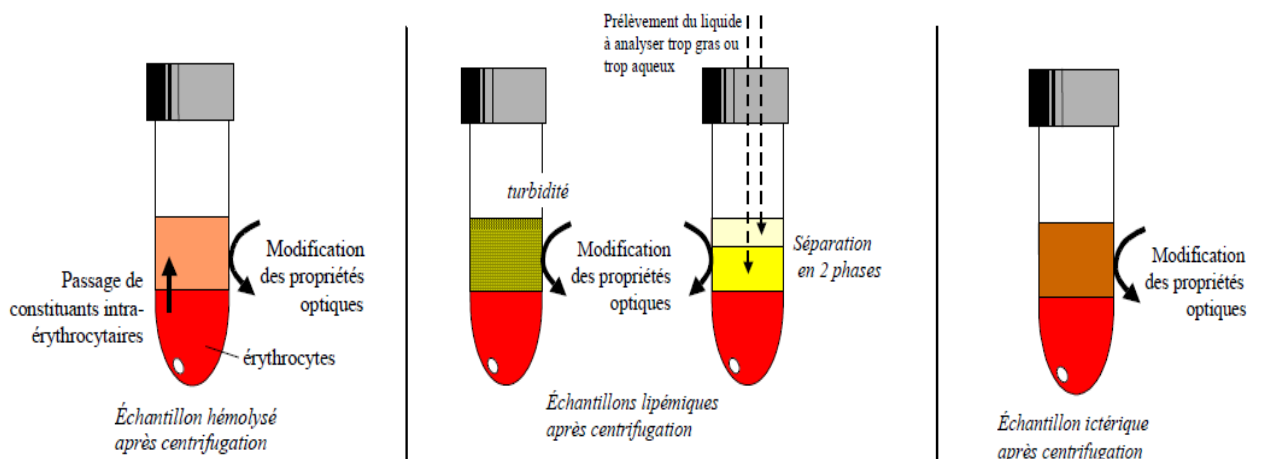

II. VARIATION D'UNE MESURE DE LABORATOIRE DE BIOCHIMIE EN DEHORS DE TOUTE PERTURBATION PATHOLOGIQUE

En dehors des variations induites par une affection ou une maladie, un résultat d'analyse biologique peut varier pour différentes raisons. Il existe deux sources importantes de variation : analytique et biologique.

1. VARIATION ANALYTIQUE

On peut décomposer cette variation en deux groupes : pré- instrumentale quand cela concerne le prélèvement, le stockage et le transport de l'échantillon biologique ; instrumentale lors de la réalisation de l'analyse.

Le résultat d'une analyse peut être influencé par la qualité du prélèvement (hémolyse, lipémie), par le choix du tube de prélèvement (sec, EDTA, héparine, citrate) ainsi que par la prise en charge du prélèvement : il doit être traité le plus rapidement possible au laboratoire, transporté dans des conditions adéquates qui permettent la stabilité de l'échantillon, et rapidement décanté ou centrifugé. Il incombe à la personne qui fait le prélèvement de fournir au laboratoire d'analyse le meilleur prélèvement possible.

Concernant la variation instrumentale, elle dépend pour une partie de la qualité technique de la mesure et notamment de sa précision. Ainsi plus la méthode analytique sera précise et moins il y aura de variations liées à la technique dans les résultats.



Cependant d'autres facteurs interviennent notamment la méthodologie et l'équipement utilisé pour réaliser les dosages.


2. VARIATION BIOLOGIQUE

Plusieurs facteurs biologiques sont source de variations dans les résultats d'un paramètre biologique, non seulement l'espèce mais aussi la race, l'âge, le sexe, l'alimentation, et le stade physiologique. Les variations qu'ils génèrent sont généralement connues mais ce n'est pas toujours le cas. On peut alors établir des intervalles de référence pour un groupe donné avec des critères objectifs bien définis.

D'autres facteurs biologiques notamment intra individuels sont moins facilement identifiables comme l'état de stress d'un animal (lors de la contention, d'un transport, une excitation

passagère), le rythme biologique propre à chaque animal ou bien l'administration de médicaments ou de tranquillisants. Ils ont eux aussi un impact sur les résultats de l'analyse.

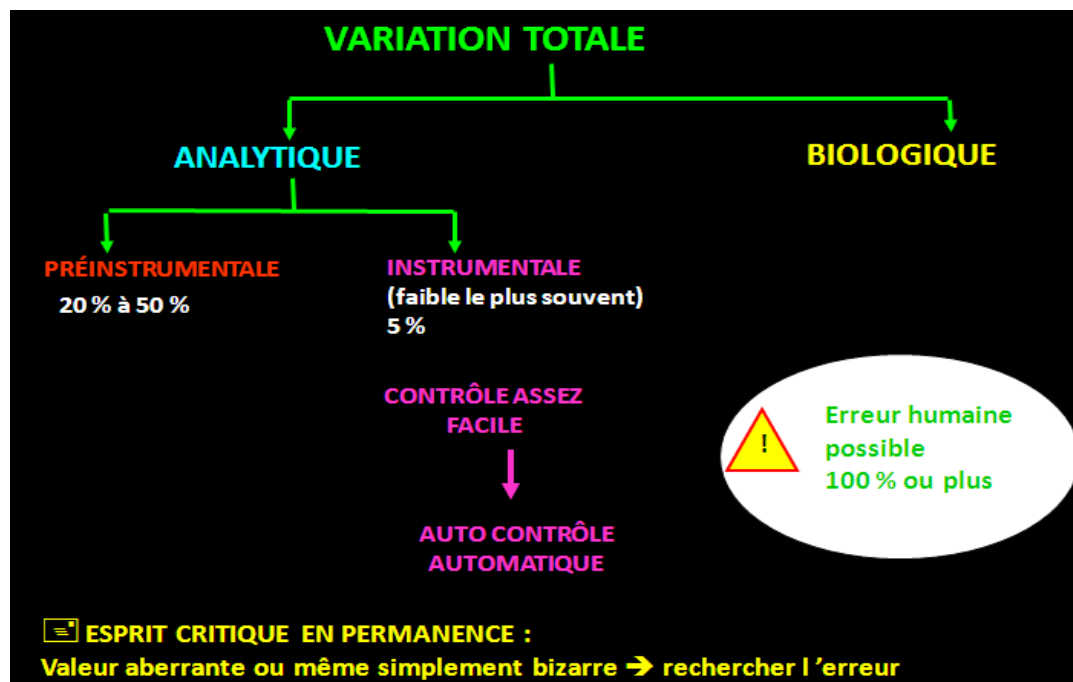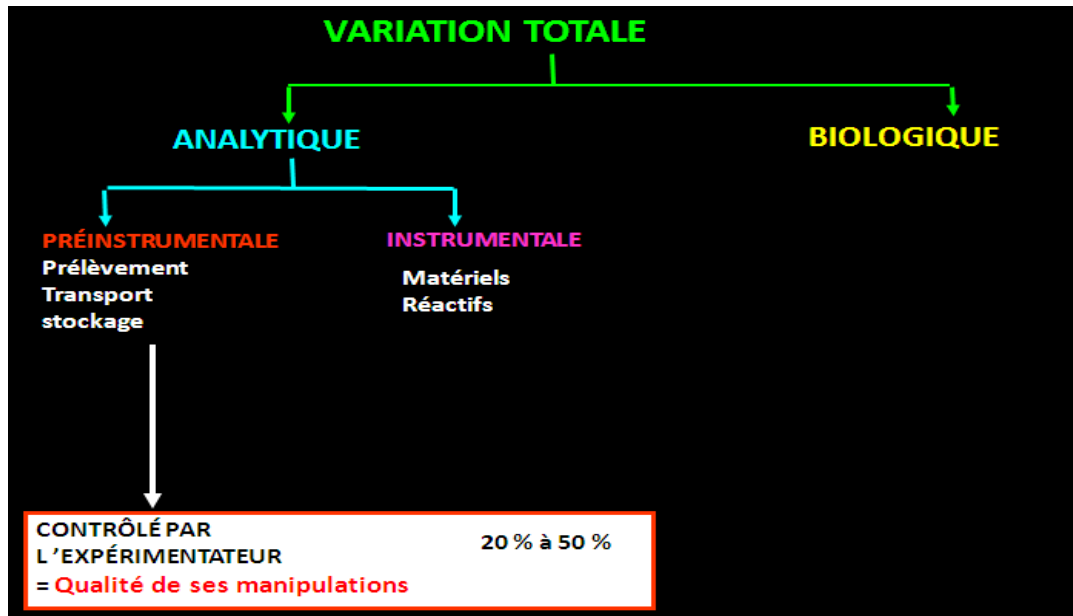

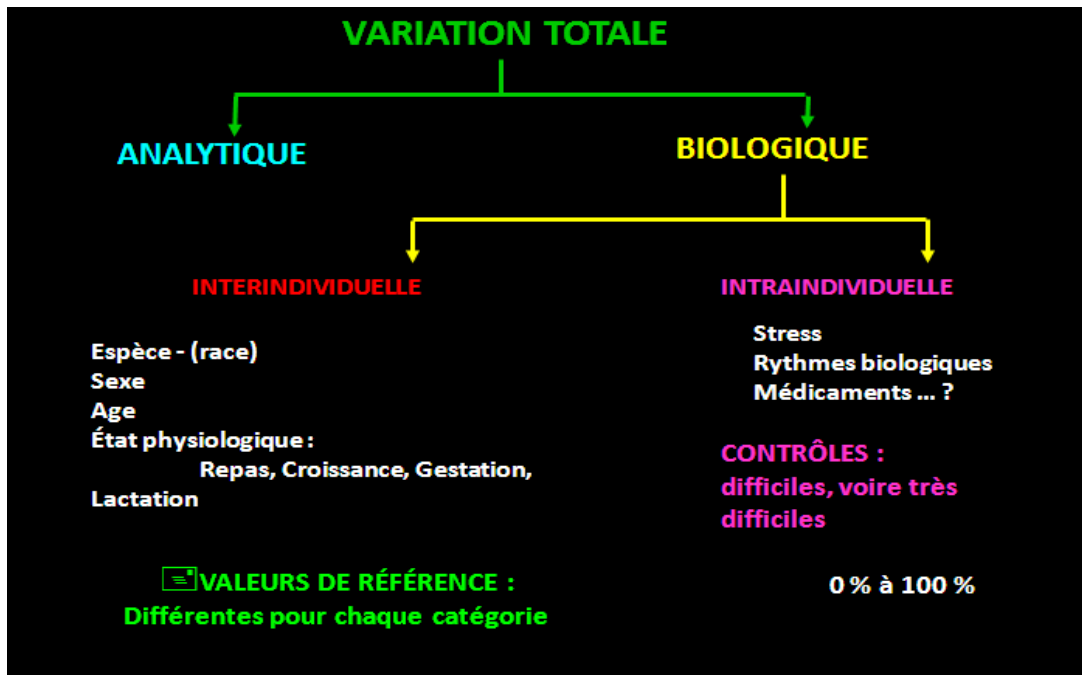

- Chez les espèces animales monogastriques, le jeûne est recommandé pour éviter les interférences éventuelles de l'absorption digestive et les variations de concentrations sanguines qui en résultent.
- Lors de la ponction veineuse, la mise en place d'un garrot trop serré ou trop prolongé est un facteur d'hémoconcentration locale et de libération de facteurs tissulaires gênants pour la réalisation des tests d'hémostase.
- Le prélèvement sanguin doit être effectué sur un animal calme en évitant, dans la mesure du possible, toute contention brutale et le recours à une sédation ou anesthésie préalable.